



测试报告

样品信息			
样品名称	丹蓝通络口服液	样品性状	液体
收样日期	2025/02/27	测试期间	2025/03/17~2025/03/19
测试成分及结构式			
/			
实验要求			
尽量分离主目标物附近的杂质，保证多针序列杂质没有明显漂移			
参考方法			
客户			
试剂信息			
试剂名称	级别	品牌	
甲醇	色谱纯	月旭	
冰醋酸	分析纯	国药	
仪器信息			
测试仪器		仪器型号	
高效液相色谱仪		安捷伦 1260	

1. 试验过程

1.1. 色谱条件

色谱柱:	Ultimate® PG-C18 (4.6×250mm, 5μm)
流动相:	流动相 A: 0.04%冰醋酸 流动相 B: 甲醇
流 速:	1.0mL/min
进样量:	10μL
柱 温:	30℃

声明: 除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add: 上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼

Add: 浙江省金华市婺城区双林南街168号

Add: 江苏省南京市六合区天圣路22号F栋4楼

Tel: 400-810-6969

邮编: 201600

邮编: 321000

邮编: 211500

Web: www.welchmat.com



检测器:	UV		
洗脱程序	时间/min	A/%	B/%
	0	86	14
	20	86	14
	21	10	90
	36	10	90
	37	86	14
	50	86	14
检测波长:	280nm		
注意事项	/		

1.2. 溶液配制

1.2.1. 流动相配制

流动相 A: 取 0.4mL 冰醋酸, 加入 1000mL 超纯水中, 混匀, 抽滤, 超声脱气, 即得。

流动相 B: 取色谱级甲醇适量, 超声脱气, 即得。

1.2.2. 对照品溶液: 客户提供。

1.2.3. 供试品溶液: 客户提供。

声明: 除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add: 上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼

Add: 浙江省金华市婺城区双林南街168号

Add: 江苏省南京市六合区天圣路22号F栋4楼

Tel: 400-810-6969

邮编: 201600

邮编: 321000


邮编: 211500

Web: www.welchmat.com




2. 谱图和数据

(1) 对照品溶液图

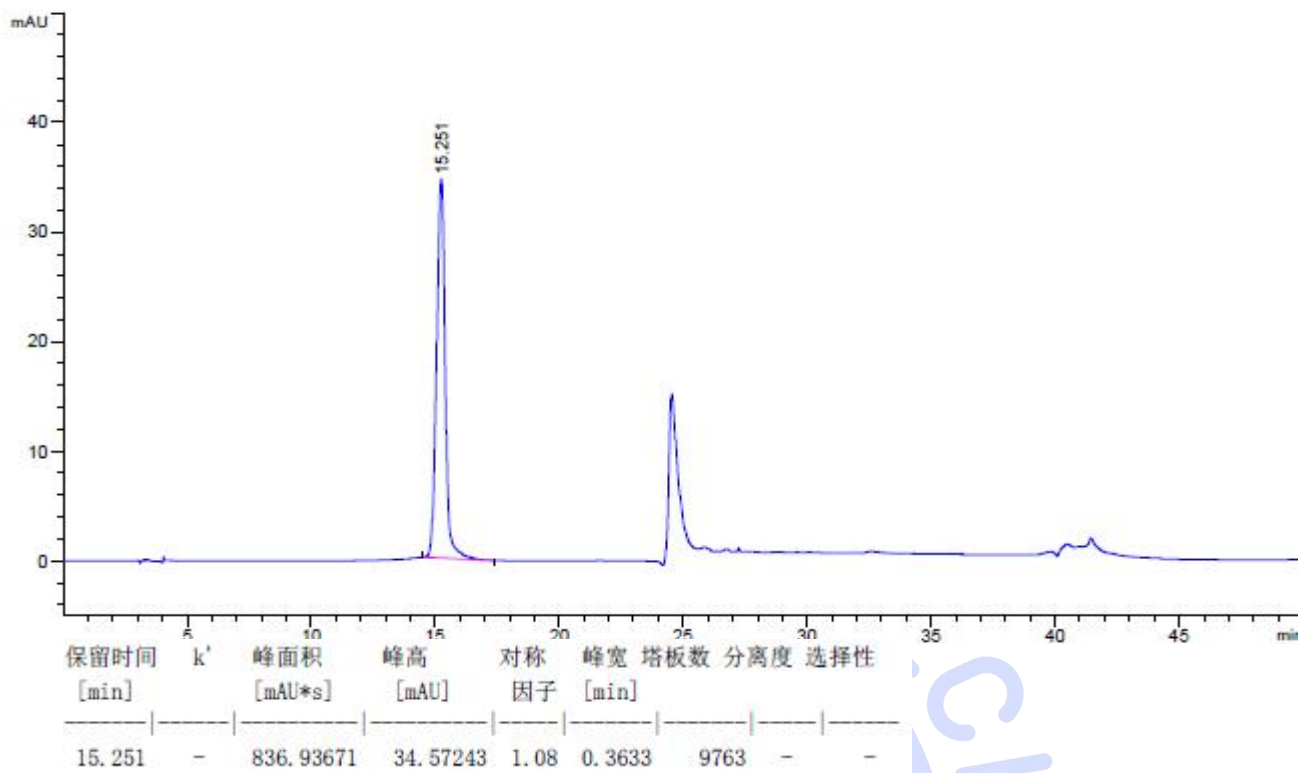

(2) 供试品溶液放大图

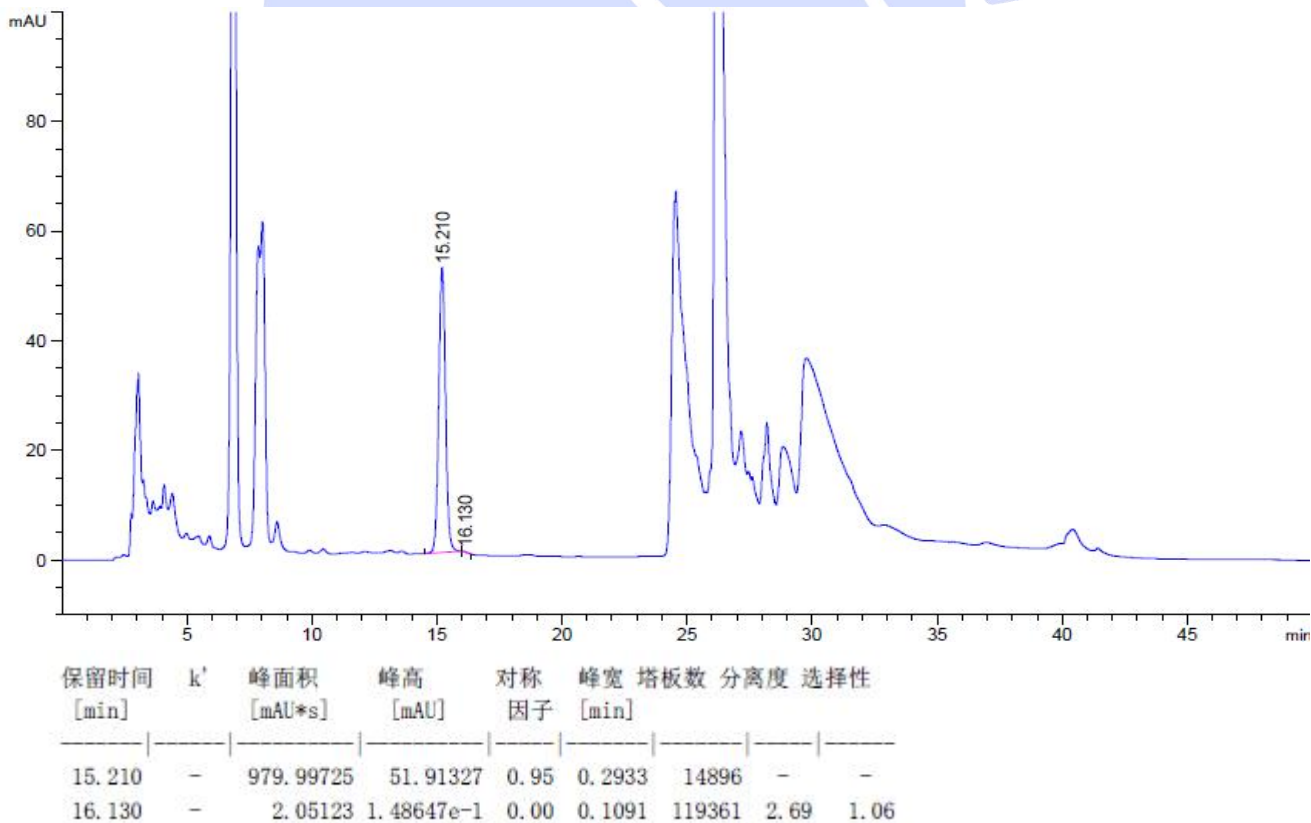

声明: 除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add: 上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼

Add: 浙江省金华市婺城区双林南街168号

Add: 江苏省南京市六合区天圣路22号F栋4楼

Tel: 400-810-6969

邮编: 201600

邮编: 321000

邮编: 211500

Web: www.welchmat.com



3. 结论

使用月旭 Ultimate® PG-C18 (4.6×250mm, 5μm), 在此色谱条件下, 能满足客户检测需求。



声明: 除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add: 上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼

Add: 浙江省金华市婺城区双林南街168号

Add: 江苏省南京市六合区天圣路22号F栋4楼

Tel: 400-810-6969

邮编: 201600

邮编: 321000

邮编: 211500

Web: www.welchmat.com